


**DIRECTA**  
**Sendoline®**

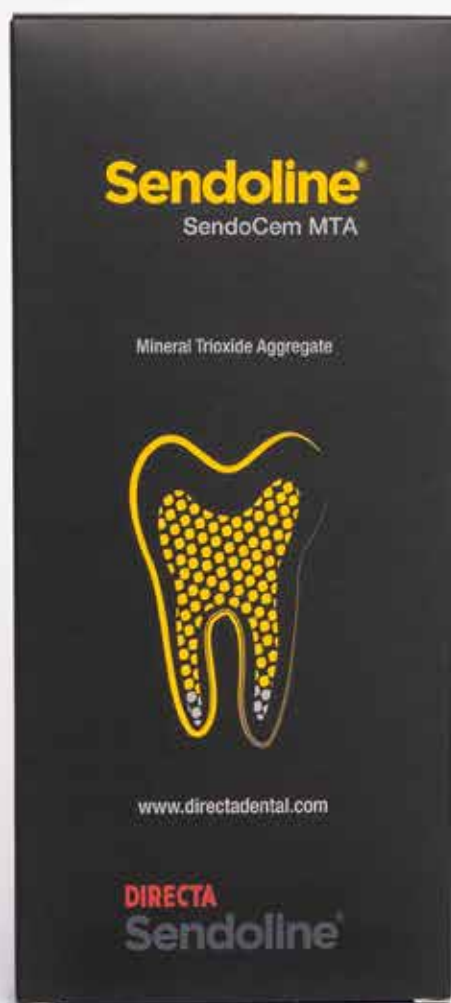

**Material de reparación  
de conductos radiculares**

**Fácil | Rápido | Duradero**


# SendoCem MTA



**SendoCem MTA** es un cemento endodóntico biocerámico a base de silicato de calcio, listo para usar y premezclado, diseñado para diversos tratamientos de la pulpa vital. Absorbe la humedad del ambiente para iniciar la reacción de hidratación, lo que le permite fraguar sin necesidad de mezclar polvo y líquido.

**SendoCem MTA** ofrece una excelente biocompatibilidad, bioactividad y propiedades de sellado, además de efectos antibacterianos, lo que lo convierte en una opción ideal para tratamientos de la pulpa vital.

Su gran capacidad de sellado se debe a su naturaleza bioactiva, que libera iones de calcio y promueve la formación de una capa de apatita cuando se expone a fluidos fisiológicos que contienen fosfato.

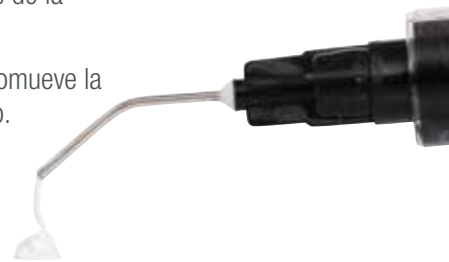

## JERINGA PREMEZCLADA

- Lista para usar
- No requiere mezcla, siempre un resultado consistente
- Aplicación fácil y directa con una cánula que alcanza zonas profundas y estrechas


## TIEMPO DE FRAGUADO RÁPIDO

- 3-5 minutos

## EXCELENTES PROPIEDADES FÍSICAS

- Alta resistencia a la compresión\*
- Baja solubilidad\*\*
- Alta radiopacidad
- Alta resistencia a la decoloración, no contiene óxido de bismuto

## INDICACIONES

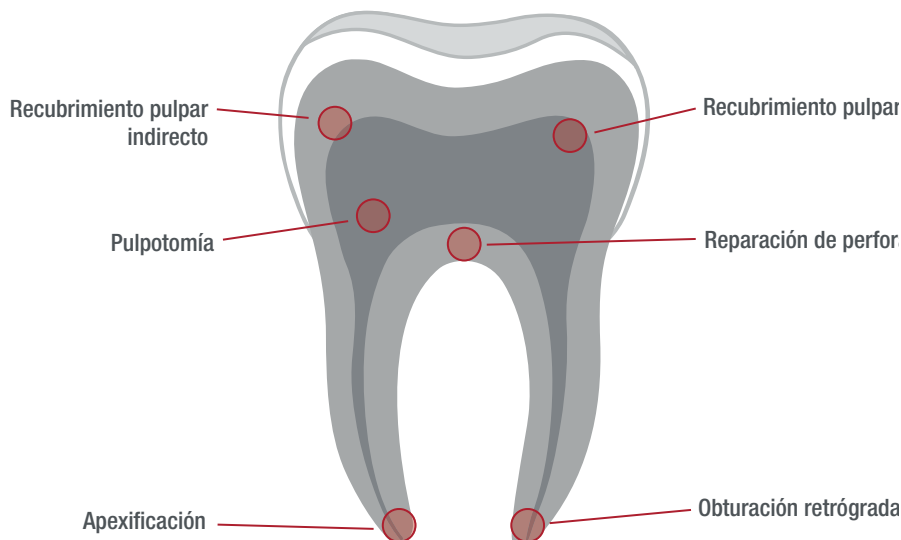


| REF    | Nombre del producto                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 300002 | <b>SendoCem MTA</b><br>(1x jeringa 2g, 20x puntas 22 G,<br>5x tapones) |

\*Evaluation of Setting Time, Solubility, and Compressive Strength of Four Calcium Silicate-Based Cements. Yuji Jang, Yujin Kim, Junghwan Lee, Jongsoo Kim, Joonhaeng Lee, Mi Ran Han, Jongbin Kim, Jisun Shin. JKAPD. 2023.50.2.217 | \*\*pH, Ion Release Capability, and Solubility Value of Premixed Mineral Trioxide Aggregates Seolah Back, Yuji Jan, Junghwan Lee, Joonhaeng Lee, Jinsun Shin, Jongbin Kim, Miran Han, Jongsoo Kim JKAPD.2022.49.4.379

**MARUCHI**  
101, Donghwagongdanro,  
Munmak-eup,  
Wonju-si, Gangwon-do  
26365, Republic of Korea

**DIRECTA AB**  
Finvids väg 8  
194 47 Upplands Väsby, SUECIA  
+46 8 506 505 75  
www.directadental.com

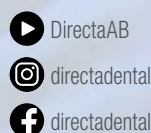

# DIRECTA