


DIRECTA **Sendoline®**

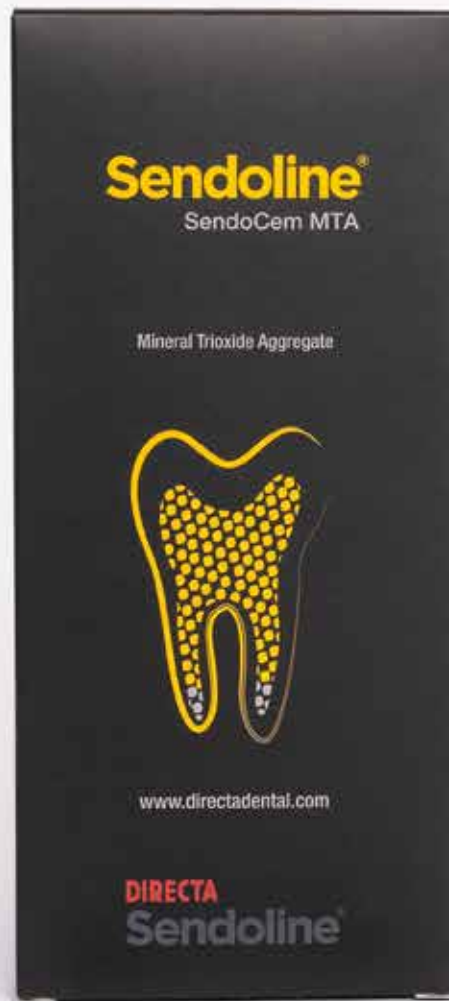

**Endodontiskt
cement**

Enkelt | Snabbt | Hållbart

SendoCem MTA

SendoCem MTA är ett färdigblandat biokeramiskt cement baserat på trikalciumsilikat. Det används vid olika typer av vital pulpa-behandlingar.

Materialet härdar av sig självt genom att ta upp fukt från omgivningen – ingen blandning av pulver och vätska krävs.

SendoCem MTA ger en mycket bra försegling, är biokompatibelt (vävnadsvänligt) och bioaktivt. Dess antibakteriella egenskaper gör det till ett utmärkt val vid vital pulpa-behandling.

Den bioaktiva egenskapen bidrar till att frigöra kalciumjoner, vilket stimulerar bildningen av ett skyddande apatitlager som ytterligare förbättrar förseglingen.



FÄRDIGBLANDAT CEMENT

- Levereras i fylld spruta- färdig att använda
- Inget behov av att blanda material, alltid ett jämt resultat
- Enkel och snabb applicering


SNABB STELNINGSTID

- 3-5 minuter

UTMÄRKTA FYSIKALISKA EGENSKAPER

- Hög tryckhållfasthet*
- Låg löslighet
- Hög röntgenkontrast
- Ingen risk för missfärgningar, innehåller inte vismutoxid.

INDIKATIONER

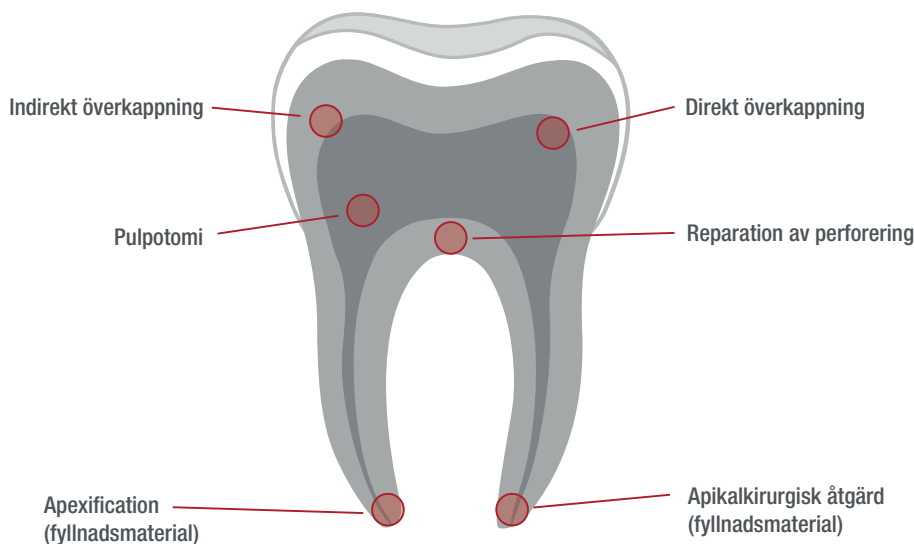

Art. nr	Produkt
300002	SendoCem MTA (1x spruta 2 g, 20x spetsar 22 G, 5x spetskorkar)

*Evaluation of Setting Time, Solubility, and Compressive Strength of Four Calcium Silicate-Based Cements. Yuji Jang, Yujin Kim, Junghwan Lee, Jongsoo Kim, Joonhaeng Lee, Mi Ran Han, Jongbin Kim, Jisun Shin. JKAPD. 2023.50.2.217 I **pH, Ion Release Capability, and Solubility Value of Premixed Mineral Trioxide Aggregates Seolah Back, Yuji Jan, Junghwan Lee, Joonhaeng Lee, Jinsun Shin, Jongbin Kim, Miran Han, Jongsoo Kim JKAPD.2022.49.4.379