



PrepSure®

ist ein Set aus drei innovativen Instrumenten zur Kronenpräparation, mit denen Sie den Abtrag am Zahn kontrollieren und validieren können, um eine optimale okklusale Passung zu erzielen. Mit drei speziellen Messinstrumenten hebt PrepSure Ihre Kronenpräparationen auf ein neues Level und sorgt jedes Mal für höchste Präzision, Sicherheit und Effizienz.

Diese Instrumente sind für die Verbesserung der Präzision und Effizienz der Kronenpräparation unerlässlich.

- Macht Schluss mit Spekulationen.
- Verhindert eine zu große oder zu geringe Reduktion der Zahnschubstanz.
- Vermeidet eine zweite Abformung oder einen erneuten digitalen Scan.
- Löst bekannte Probleme bei der Kronenpräparation.
- Eine optimale Ergänzung für Ihren digitalen Workflow.
- Autoklavierbar.

Erzielen Sie eine schnelle und zuverlässige Zahnpräparation mit PrepSure, einem Instrument, das eine präzise okklusale Passung für Kronen und andere prothetische Restaurationen gewährleistet.

PrepSure stellt sicher, dass jede Präparation den spezifischen Anforderungen des verwendeten Materials entspricht, wodurch Fehler minimiert und die klinischen Ergebnisse verbessert werden. PrepSure ist langlebig, präzise und unverzichtbar für moderne Kronen-Workflows. Es hilft Ihnen, eine Unter- oder Überreduktion bei allen Restaurationsmaterialien zu vermeiden.

HAUPTMERKMALE


- Ermittlung und Bestätigung des für Kronen und andere prothetische Restaurationen erforderlichen Platzes für die Zahnreduktion
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Prothetik-Materialien.



Video:
Directa Klinischer Leitfaden -
Anwendung - PrepSure



Weitere Informationen zu PrepSure erhalten
Sie, indem Sie den QR-Code mit Ihrem
Mobiltelefon scannen oder die Website
besuchen: www.directadental.com

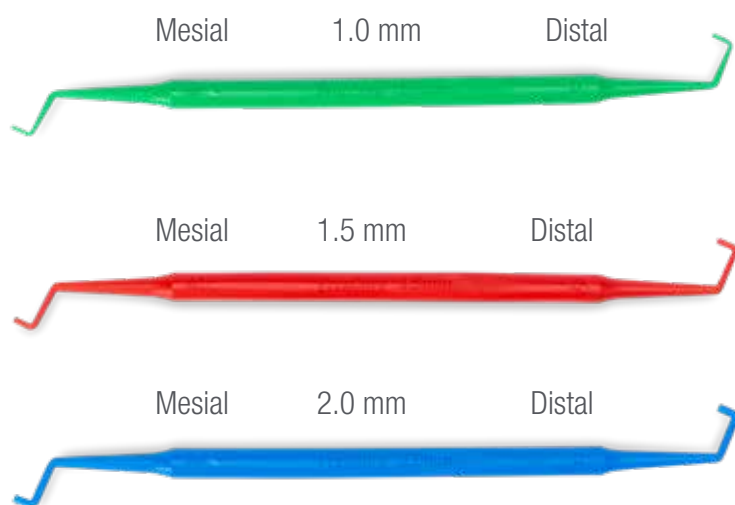

Prod. Nr. 92403 **Produkt Beschreibung**
PrepSure Assorted Set
(1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 3 St.

Prod. Nr. 92410 **Produkt Beschreibung**
PrepSure Single 1.0 mm grün, 1 St.
92413 PrepSure 1.0 mm grün Set, 3 St.

Prod. Nr. 92415 **Produkt Beschreibung**
PrepSure Single 1.5 mm rot, 1 St.
92418 PrepSure 1.5mm rot Set, 3 St.

Prod. Nr. 92420 **Produkt Beschreibung**
PrepSure Single 2.0 mm blau, 1 St.
92423 PrepSure 2.0 mm blau Set, 3 St.

PrepSure, Kronen Prep Guide

Restaurations- typ	Material	Erforderlicher okklusaler Platz*
Vollkrone	Vollmetall/Gold	1,0- 1,5 mm
Vollkrone	PFM (Porzellan auf Metall- gerüst)	Funktionstragender Höcker: 1,5-2,0 mm Nicht funktionstragender Höcker: 1,0- 1,5 mm
Vollkrone	Monolithisches Zirko- noxid	1,0-1,5 mm
Vollkrone	Verblendetes Zirkonoxid	1,5-2,0 mm
Vollkrone	Lithiumdisilikat	1,5-2,0 mm
Vollkrone	Feldspatkeramik	≥ 2,0 mm
Vollkrone	Kompositkrone	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Metall/Gold	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Keramik/Lithiumdisilikat	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Zirkonoxid	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Feldspatkeramik	≥ 2,0 mm
Inlay / Onlay	Komposit	1,0-1,5 mm



M-Spitze bestätigt den Abstand in der mesialen Hälfte



D-Spitze bestätigt den Abstand in der distalen Hälfte

*Hinweis:

Klinische Situationen können variieren und unter Umständen Anpassungen des empfohlenen okklusalen Platzes für unterschiedliche Materialien erfordern.

Der klinische Kontext muss bei der Festlegung des erforderlichen okklusalen Platzes stets berücksichtigt werden.

Die Hersteller geben Anforderungen an die okklusale Reduktion vor; Zahnärztinnen und Zahnärzte sollten diese Anforderungen daher vorab überprüfen.