



PrepSure®

est un ensemble de trois instruments innovants pour la préparation des couronnes. Ils ont été conçus pour aider à contrôler et confirmer la quantité de réduction dentaire nécessaire à l'obtention d'un dégagement occlusal parfait. Grâce aux trois instruments PrepSure la préparation des couronnes devient plus précise, fiable et efficace.

Ces instruments sont essentiels pour améliorer la précision et l'efficacité lors de la préparation des couronnes.

- Élimine toute approximation.
- Évite la sous-réduction ou la sur-réduction de la structure dentaire.
- Évite une deuxième impression ou un deuxième scan.
- Résout un problème très courant lors de la préparation des couronnes.
- Un complément idéal de votre workflow digital
- Autoclavable

PrepSure est un instrument qui garantit un dégagement occlusal précis pour les couronnes et autres restaurations rendant la préparation dentaire rapide et fiable.

PrepSure garantit que chaque préparation répond aux exigences spécifiques du matériau utilisé, minimise les erreurs et améliore les résultats cliniques. PrepSure est durable, précis et essentiel pour les flux de travail modernes et aide à éviter la sous-réduction ou la sur-réduction pour tous les matériaux de restauration.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indique et confirme l'espace de réduction dentaire requis pour les couronnes et autres restaurations prothétiques.
- Compatible avec plusieurs matériaux prothétiques




Video:
Guide Clinique Directa -
Mode d'emploi – PrepSure



Scan le QR code pour plus
d'informations sur PrepSure
ou rendez-vous sur www.directadental.com

DIRECTA PrepSure®

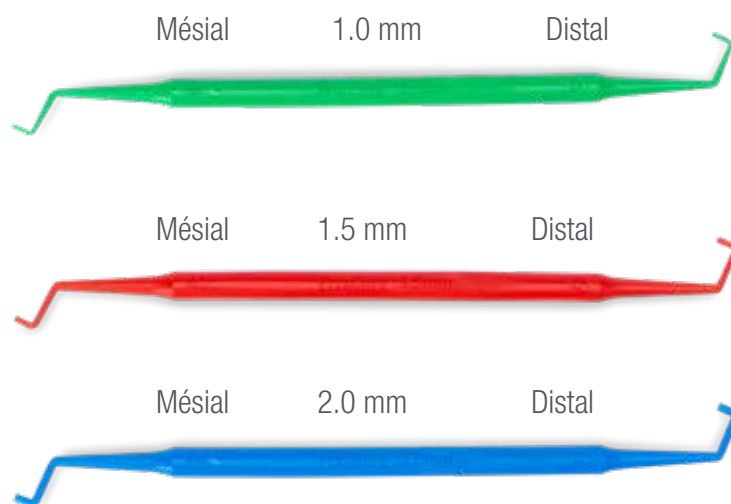

Prod No 92403 **Product Description**
PrepSure Assorted Set
(1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 3 pcs

Prod No 92410 **Product Description**
PrepSure Single 1.0 mm green, 1 pc
92413 PrepSure 1.0 mm green Set, 3 pcs

Prod No 92415 **Product Description**
PrepSure Single 1.5 mm red, 1 pc
92418 PrepSure 1.5mm red Set, 3 pcs

Prod No 92420 **Product Description**
PrepSure Single 2.0 mm blue, 1 pc
92423 PrepSure 2.0 mm blue Set, 3 pcs

PrepSure, Guide de préparation d'une couronne

Type de restauration	Matériau	Espace occlusal nécessaire*
Couronne	Métallique/Or	1,0- 1,5 mm
Couronne	PPFM Porcelaine sur métal	Cuspide fonctionnelle 1,5-2,0 mm Cuspide non fonctionnelle 1,0- 1,5 mm
Couronne	Monolitique Zircon	1,0-1,5 mm
Couronne	Zircon stratifié	1,5-2,0 mm
Couronne	Disilicate de lithium	1,5-2,0 mm
Couronne	Porcelaine Feldspatique	≥ 2,0 mm
Couronne	Composite résine	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Métallique/Or	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Ceramique / Disilicate de lithium	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Zircon	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Porcelaine Feldspatique	≥ 2,0 mm
Inlay / Onlay	Composite résine	1,0-1,5 mm

*Note:

Les situations cliniques étant variables, elles peuvent nécessiter une adaptation de l'espace occlusal recommandé en fonction des matériaux employés. Il importe, dès lors, de toujours considérer le contexte clinique lors de la détermination de l'espace occlusal requis. Par ailleurs, les fabricants spécifient les exigences relatives à la réduction occlusale ; il appartient donc au praticien de s'y référer préalablement.



L'embout M confirme la réduction pour la moitié Mésiale



L'embout D confirme la réduction pour la moitié Distale

Pour toute information complémentaire merci contacter:

Anne Graf Cache
Area Sales Manager, Belgium, France, Spain, Portugal
tel. +33 (0)7 67 30 71 38
anne.graf.cache@directadental.com